



RED DE ALERTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO
(NO ALIMENTARIOS)

DE: EL RESPONSABLE DE CONTROL DE MERCADO
A: JEFE DE SERVICIO DE INSPECCIÓN SANITARIA

Nº R. A. (IRC): 45R001/1059/2020

Nº R. A. D.G.C.: INC-INF/140/2020



Documento Verificable en www.jccm.es/mediante
Código Seguro de Verificación (CSV): E8C6C6CFB8F0AF36EE59B2

PRODUCTO: MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95",		CODIGO GRECAE PRODUCTO: DN3664010	
MARCA: YUZHILAB		MODELO: KN95, REFERENCIA	LOTE:
C.B.: 6973080410080	ORIGEN DEL PRODUCTO: CHINA	CCAA/PAIS NOTIFICANTE ANDALUCIA	
TIPO DE RIESGO: MICROBIOLÓGICO		FECHA ALERTA:	FECHA PLAZO:
MOTIVO DE RIESGO: incumple Resolución 23/04/2020 de la Secretaria Gral. de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, referente a EPI'S, al no tener autorización Apto. 7 Recomendación UE 2020/403			

Le comunico que se ha recibido de la Dirección General de Consumo la notificación de la alerta arriba referenciada, la cual ha sido enviada a las Delegaciones Provinciales de Desarrollo Sostenible de las cinco provincias de nuestra Comunidad Autónoma.

Se han dado instrucciones para que una vez localizado el producto sea retirado del mercado.

Lo que se pone en su conocimiento, para los efectos que estime oportunos.

TOLEDO, 8 de Octubre de 2020
EL RESPONSABLE DE CONTROL DE MERCADO

Firmado digitalmente el 08-10-2020
por Esteban Escobar Dominguez
Motivo: Certifico la precisión e integridad de este documento.

Fdo: E

NINGUEZ

N95
FP2 **YU**
YUZHILAB

... protection of non-oil particles, such as dusts and inhaled
... materials, floor pollen, and certain other substances.

149-2003+A1-2009
... Standard: GB 2626-2006 KN95

Storage Conditions and Shelf Life

... less than 80% relative humidity, non-corrosive gas and
... well-ventilated room. Avoid high temperature.
... The shelf life of unopened product is 5 years from date of manufacture.
Date of Manufacture: Find on package.

Fitting Instructions


1. Unfold respirator.
2. With the nosepiece facing away from you and facing up, pull each earloop strap over the ear.
3. Mold the nosepiece firmly to the shape of your nose bridge to form a good seal.

Use Limitations and Warnings

1. Inspect respirator before each use. Discard and replace if it becomes damaged.
2. Do not use this respirator when concentrations of contaminants are immediately dangers to life or health.
3. Do not alter, wash, abuse or misuse this respirator.
4. This product helps protect against certain particles. It does not completely eliminate the risk of sickness or infection.
5. Failure to follow all instructions and warnings can reduce respirator effectiveness and may result in illness, disability or death.
6. Materials in contact with the skin may cause allergic reactions in some individuals.

MADE IN CHINA
Manufacturer: Shenzhen Yuzhi Technology Co., Ltd.
Address: Tefaguangwang Building, Shutianpu Community,
Mation Street, Guangming New District, Shenzhen, China.
Website: www.yuzhilab.com

GA | PASSED

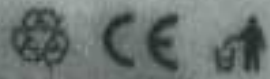

6 973080 410080

... hidrolkohol...
... viles, tejidos, ratón, tarjetas, etc.; las
... comunes como eran la adecuada ventilación, la
... ahora se describe según la
... mantener la distancia interpersonal